


ECHELLE À MAIN DE PARINAUD POUR LETTRÉ

Référence : 21026

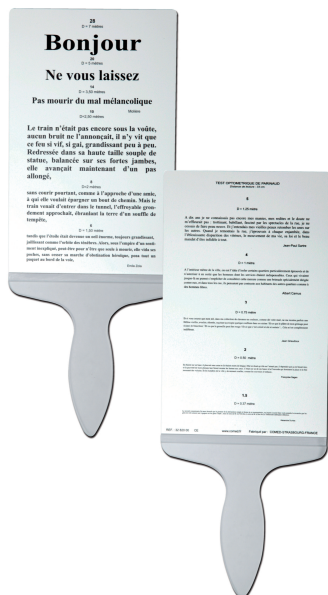

Description :

- Échelle à main de Parinaud conçue pour tester l'acuité visuelle de près chez les personnes sachant lire.
- Plaque PVC rigide avec poignée en plexiglass offrant une bonne prise en main pendant l'examen.
- Plaquette recto-verso, permettant une lecture fluide et un contrôle rapide de la vision avec différents textes.
- Repères de distance de lecture allant de 0,37 m à 7 m pour adapter l'évaluation aux besoins du praticien.
- Outil léger et compact, facile à transporter et à ranger dans un cabinet médical, une infirmerie ou un service de santé scolaire.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : échelle à main de Parinaud pour personnes lettrées.
- **Matériau plaquette** : plaque en PVC blanc 1000 g/m².
- **Poignée** : poignée transparente en plexiglass pour une bonne préhension.
- **Distance de lecture** : texte lisible de 0,37 m à 7 m.
- **Dimensions / poids** : épaisseur 2 mm, poids 118 g (plaque légère et maniable).

Echelle à main de Parinaud pour lettré : évaluation rapide de la vision de près

Permet de contrôler simplement et rapidement la vision de près des personnes lettrées grâce à une plaque PVC recto-verso, maniable, avec poignée en plexiglass et repères de lecture de 0,37 m à 7 m.

- **Lecture de près simplifiée**
- **Plaque PVC résistante**
- **Poignée plexiglass pratique**
- **Recto-verso pour examen**
- **Légère et facile à manier**

Mode d'emploi :

- Installer la personne assise face à la source lumineuse, à une distance adaptée selon les repères de lecture (de 0,37 m à 7 m).
- Tenir l'échelle à main de Parinaud par la poignée en plexiglass, bien verticale, avec le texte orienté vers le patient.
- Demander à la personne de lire les lignes de texte de plus en plus petites, à voix haute, sur une face de la plaquette puis, si besoin, sur l'autre.



ECHELLE À MAIN DE PARINAUD POUR LETTRÉ

Référence : 21026

- Adapter la distance de lecture ou couvrir un œil, selon le protocole de dépistage ou de contrôle de la vision choisi.
- Noter le plus petit texte lu correctement pour évaluer la vision de près et consigner le résultat dans le dossier du patient.

Précautions d'utilisation :

- Veiller à toujours réaliser le test dans de bonnes conditions de luminosité afin de ne pas fausser le résultat.
- Nettoyer régulièrement la plaque PVC et la poignée en plexiglass avec un chiffon doux légèrement humide et un produit adapté.
- Éviter les produits abrasifs susceptibles de rayer le PVC ou d'altérer la lisibilité des textes.
- Ne pas plier ou tordre la plaquette pour préserver sa planéité et la qualité de lecture.
- Conserver l'échelle à l'abri de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil pour maintenir la stabilité des inscriptions.

Un outil de dépistage pratique pour la vision de près

L'**échelle à main de Parinaud pour lettré** est un support de référence pour le **test de lecture de près** et le contrôle de l'**acuité visuelle** en cabinet médical, infirmerie scolaire, service de santé au travail ou centre de dépistage. Grâce à sa **plaque PVC recto-verso** avec texte imprimé et à sa **poignée en plexiglass**, elle permet de réaliser des examens rapides, fiables et répétables, sans équipement complexe, auprès des personnes sachant lire.

Facile à manipuler et à nettoyer, cette **échelle de Parinaud** s'intègre parfaitement dans une démarche de **dépistage visuel** systématique (bilans de santé, visites médicales, examens scolaires). Son faible poids et son format compact en font un outil pratique à garder à portée de main dans tout espace de consultation. En l'ajoutant à votre matériel d'**examen ophtalmologique de base**, vous optimisez la qualité de vos contrôles de vision de près et le suivi des patients au quotidien.