


## PANSEMENT PLASTIQUE MICROPERFORÉ 6 CM × 1 M

### Référence : 1064

#### Description :

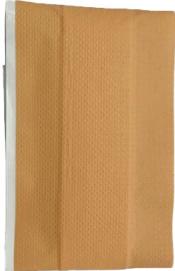

- Fixation simple et rapide des compresses et pansements en première intention.
- Support plastique microperforé favorisant l'aération de la peau.
- Rouleau à découper : ajustez la longueur/largeur selon la zone à couvrir.
- Bonne conformabilité pour épouser les reliefs et articulations.
- Format compact 1 m idéal pour sac d'intervention et réassort.

#### Caractéristiques techniques :

- **Type** : rouleau de pansement plastique microperforé à découper
- **Dimensions** : largeur 6 cm × longueur 1 m
- **Fonction** : fixation de compresses/pansements, maintien léger
- **Atout** : microperforations pour un port plus confortable
- **Conditionnement** : format économique de réassort

## Pansement plastique microperforé 6 cm × 1 m : fixation respirante et découpe sur-mesure

**Pansement plastique microperforé** : rouleau à découper précis et respirant, pour une fixation fiable des compresses et pansements, adapté aux interventions rapides à domicile ou en trousse de secours.

- **Rouleau 6 cm × 1 m**
- **Microperforé respirant**
- **Découpe au format voulu**
- **Bonne tenue sur peau sèche**
- **Idéal trousse & réassort**

#### Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher soigneusement la peau autour de la zone à protéger.
- Appliquer la compresse/pansement sur la plaie selon les bonnes pratiques.
- Dérouler le rouleau, découper la longueur nécessaire (ciseaux) au plus près.
- Positionner et lisser sans créer de plis ; vérifier la bonne tenue.
- Renouveler la fixation si elle se décolle ou après humidification prolongée.

#### Précautions d'utilisation :

- Usage externe ; appliquer sur peau saine et sèche autour de la plaie.
- Ne pas serrer excessivement pour ne pas gêner la circulation.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## PANSEMENT PLASTIQUE MICROPERFORÉ 6 CM × 1 M

Référence : 1064

- Éviter le contact direct avec la plaie ; utiliser une compresse stérile dédiée.
- Retirer délicatement en tirant parallèlement à la peau.
- En cas de rougeur/irritation, arrêter l'usage et consulter si nécessaire.

### **Fixation de compresses respirante et confortable au quotidien**

Conçu pour la **fixation de compresses** et le maintien de **pansements** en situation courante, ce rouleau microperforé allie praticité et confort. Sa **découpe sur-mesure** permet d'ajuster la longueur selon la zone à traiter, tandis que le support **respirant** favorise l'aération cutanée pour un port plus agréable, y compris sur des zones mobiles.

Polyvalent et facile à stocker, le **pansement plastique microperforé** en 6 cm × 1 m est un choix pertinent pour la **trousse de secours**, les déplacements et le réassort des postes de soin. Un indispensable pour sécuriser vos gestes d'**hygiène et premiers soins** en toute simplicité.

Découvrez aussi nos **fixations et accessoires de pansement**.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502