

## DÉTERGENT SOLS ET SURFACES AVEC POMPE 5L

Référence : 23029



### Description :

- Nettoyage et désinfection efficaces des dispositifs médicaux, y compris les instruments thermosensibles et le matériel d'endoscopie.
- Combinaison innovante de principes actifs garantissant une désinfection performante sans corrosion.
- S'utilise en trempage avec un temps de contact minimum de 5 minutes.
- Convient à une large gamme de matériaux médicaux.
- Conforme aux normes européennes pour une protection antimicrobienne étendue.

### Caractéristiques Techniques :

- **Solution limpide bleue:** Facile à vérifier visuellement
- **pH équilibré:** pH de 6,5 à 7,5
- **Temps de contact:** 5 à 60

### Propriétés microbiologiques :

Activité/Conditions	Concentration	Temps de contact
Bactéricide - Selon EN 13727 et EN 14561, conditions de saleté	0,5%	5 min
Levuricide - Selon EN 13624 et EN 14562, conditions de saleté	0,5%	15 min
Tuberculocide - Selon EN 14348 et EN 14563, conditions de saleté	2,0%	60 min
Efficace contre les virus enveloppés - Selon EN 14476 / EN 17111, conditions de saleté	0,5% 1,0%	15 min 5 min

## Votre allié pour la désinfection des instruments chirurgicaux

Profitez d'une solution de nettoyage médical hautement efficace et non corrosive, compatible avec une large gamme de matériaux, pour une désinfection fiable et sécurisée de vos équipements médicaux. Sa formule combine des principes actifs innovants, répond aux normes de désinfection les plus strictes

## DÉTERGENT SOLS ET SURFACES AVEC POMPE 5L

Référence : 23029

- Hygiène optimale
- Formule brevetée
- Simplicité d'utilisation
- Compatibilité étendue
- Efficacité prouvée

### Produits Complémentaires :

- [Flacon Détergent avec Doseur \(1l\) - Réf:23028](#)
- [Détergent désinfectant neutre pour sols et surfaces DDN SURF - Réf: 23022](#)

### Optimisez la désinfection de vos instruments médicaux

Un détergent spécialement conçu pour garantir une désinfection de haute qualité tout en étant facile à utiliser. Ce détergent pré-désinfectant est essentiel pour toute pratique médicale cherchant à maintenir des normes d'hygiène élevées. La solution, en plus d'être non corrosive, assure une compatibilité avec une large gamme de matériaux, réduisant ainsi les risques de détérioration des instruments.

Assurer une désinfection efficace contre les bactéries, levures, virus enveloppés, et même les mycobactéries. Adoptez une solution qui répond aux exigences professionnelles tout en simplifiant vos procédures de nettoyage.

Retrouvez également l'ensemble de nos [produits de désinfection professionnels pour le matériel médical](#).


### Mode d'emploi :




## DÉTERGENT SOLS ET SURFACES AVEC POMPE 5L

Référence : 23029

Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise en trempage, à la dilution requise, en respectant un temps de contact minimum de 5 minutes.

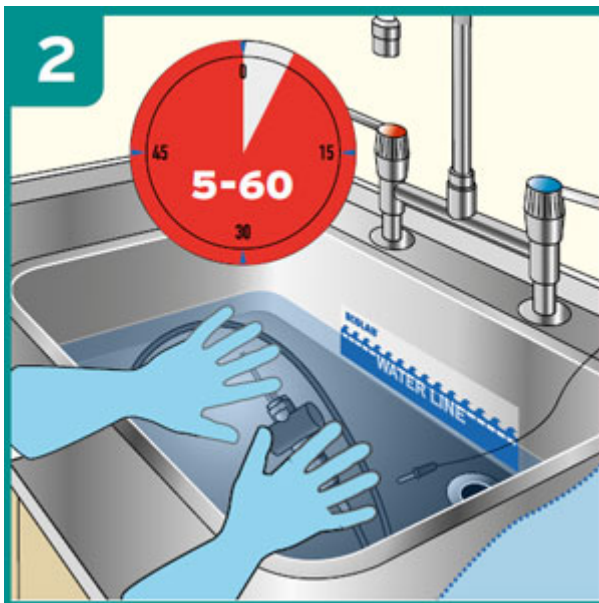


Immerger totalement le dispositif médical. Couvrir le bac durant le temps de contact. Brosser si présence de souillures apparentes.

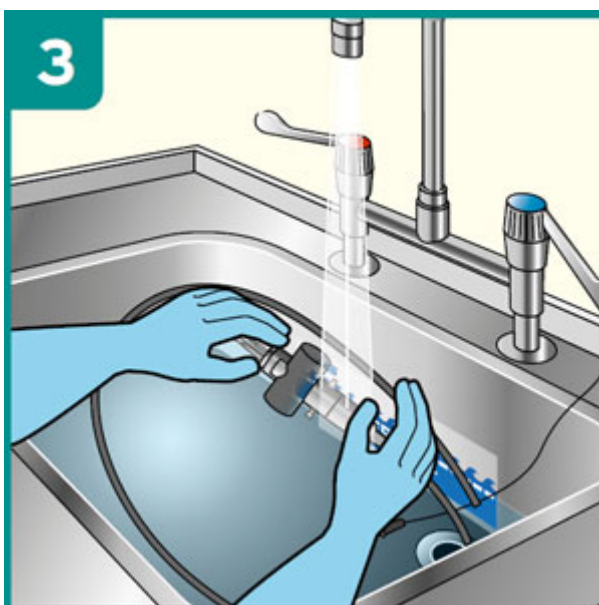

## DÉTERGENT SOLS ET SURFACES AVEC POMPE 5L Référence : 23029

Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau du réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

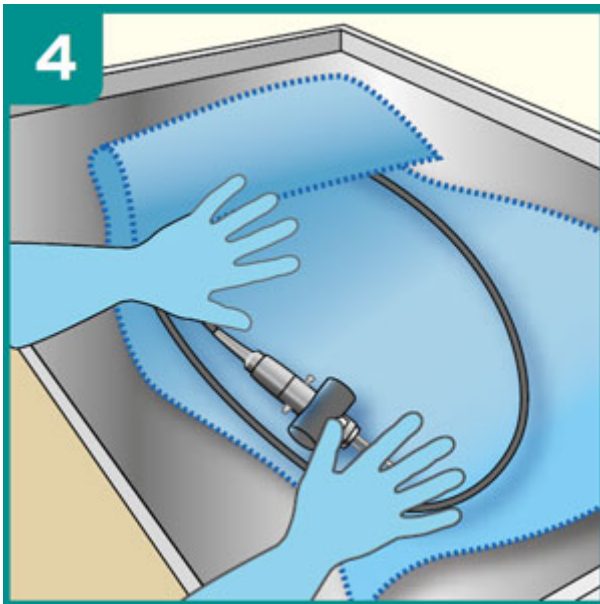

Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et ,au minimum une fois par jour afin de maintenir l'efficacité du produit. Amorcer la pompe associée avant la première utilisation.